

Pinza da biopsia a serpente sec. VITALE

Biopsy snake grasper sec. VITALE


Centrel®

The Clear Vision

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pinza da biopsia semirigida a serpente per canale operativo da 5Fr, con puntale piatto acuminato a bordi seghettati. Lunghezza operativa 34 cm, lunghezza totale 42,5 cm.

Le ganasce mobili, dal perimetro tagliente, sono progettate per recidere agevolmente l'endometrio e le neoformazioni intracavitare di piccole dimensioni. Al loro interno è accolto un puntale piatto acuminato a bordi seghettati, che ha la funzione di infiggere ed esporre i tessuti da recidere.

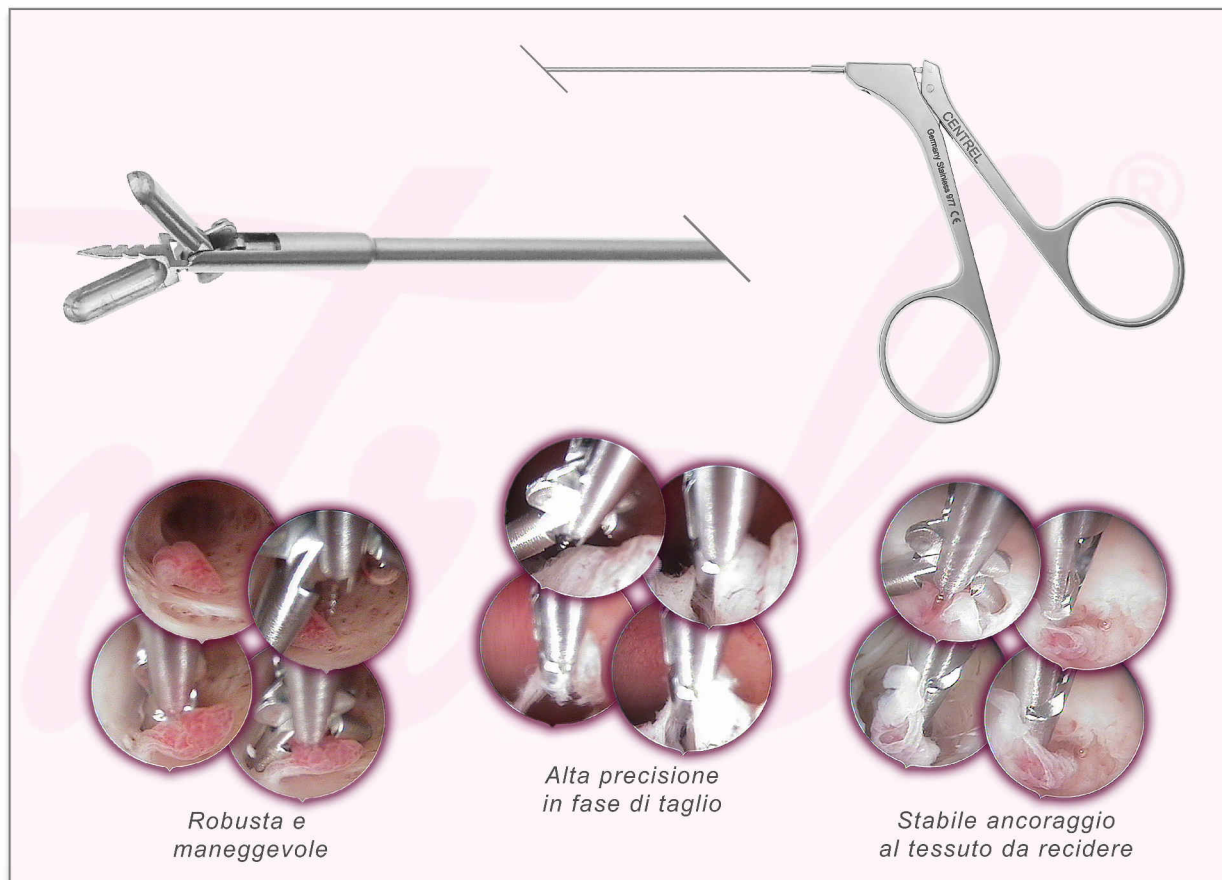

Grazie ad un colletto di rinforzo presente sullo stelo, posto in prossimità dell'impugnatura della pinza, viene raggiunta una maggiore rigidità torsionale che ne garantisce l'integrità anche nelle procedure più gravose.